


MOLECULAR
HYDROGEN WATER



EXTRA HYDROGEN INHALER
AND OZONE MAKER

Japanese technology
3 in 1

OPTIONS OF USING

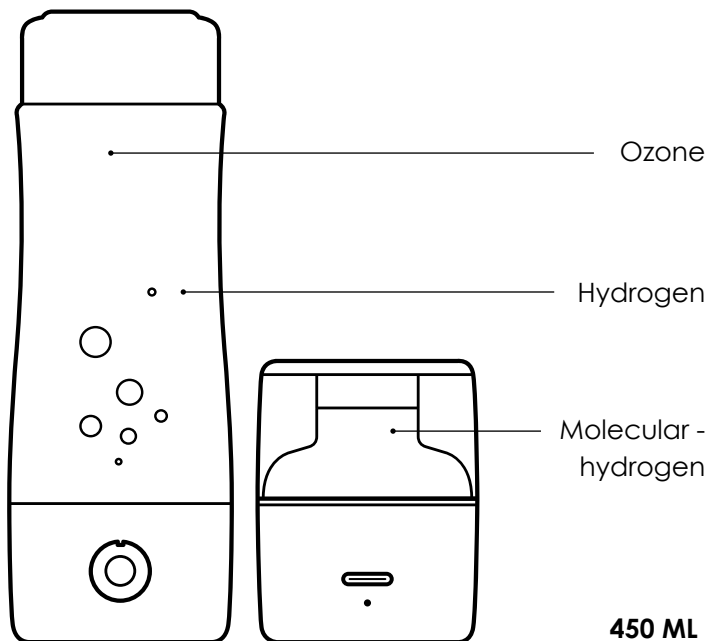

1. MOLECULAR HYDROGEN WATER

HYDROGEN-ENRICHED WATER. Hydrogen water starts the regeneration processes of the human organism, neutralizes free radicals and removes toxins. Hydrogen is the only antioxidant that can easily enter the bloodstream and eliminate oxidants in the brain. It is part of the compounds important for the body: water, proteins, fats, carbohydrates and others. Thus, it participates in all metabolic processes.

DEAQUA HAS AN OXIDATION REDUCTION POTENTIAL STARTING AT -450 MV. Water that provides the human organism with energy and health must have a negative oxidation/ reduction, while the ORP of tap and bottled water is +80 to +600 mV. Water with negative ROP increases the body's resistance to external factors, promotes tissue and cell regeneration, improves metabolism and provides additional energy.

Hydrogen water reduces allergic reactions, improves memory, normalizes blood pressure, strengthens bones and joints, lowers cholesterol levels and blood sugar levels, reduces weather sensitivity, relieves from chronic fatigue and strengthens the immune system.

2. OZONE MAKING

ACTIVATES OZONE WATER (non-drinkable). Ozone is the strongest oxidizing agent, which enables it to exhibit a powerful disinfecting effect. And this guarantees the destruction of metals and various microorganisms.

KILLS UP TO 99.9% OF BACTERIA. Under the influence of ozone in water, almost instantaneous death of all living microorganisms occurs: bacteria, viruses, fungal spores. Ozone water can be used to treat soil, fresh vegetables, fruits, and much more.

Hygienic procedures with ozone water promote faster healing of wounds, can solve many skin problems, prevent diseases of the nose, throat, oral cavity, improve skin condition, giving it tone, elasticity and freshness.

3. MOLECULAR HYDROGEN INHALING

INCLUDES HYDROGEN INHALATION. The inhalation procedure is carried out by inhaling hydrogen (H₂) through a nasal mask connected to a generator.

SATURATES WITH MOLECULAR HYDROGEN (H₂). H₂ – it is a small and safe molecule for the human body, with unique properties that make it invaluable for our health. When inhaled, molecular hydrogen is absorbed in large quantities by the lungs, brain, and the entire nervous and cardiovascular systems.

Hydrogen is a biologically active molecule that has many beneficial properties, including anti-inflammatory and antioxidant. It safely removes free radicals that occur during metabolism and destroy body cells by oxidation, which leads to both the occurrence of a variety of diseases and premature aging.

TAKE CARE OF YOUR HEALTH IN COMPLEX


COMBINE WITH
DEVITA TECHNOLOGIES

For greater effect use the DeAqua - CA-303 technology
combined with DeVita Energy 11 device
by DEHolding



SET YOUR ORGANISM
TO A HEALTHY FREQUENCY
WITH DEHOLDING

This combination allows you to further structure the water, acting on it
with certain tuned multi-frequencies.

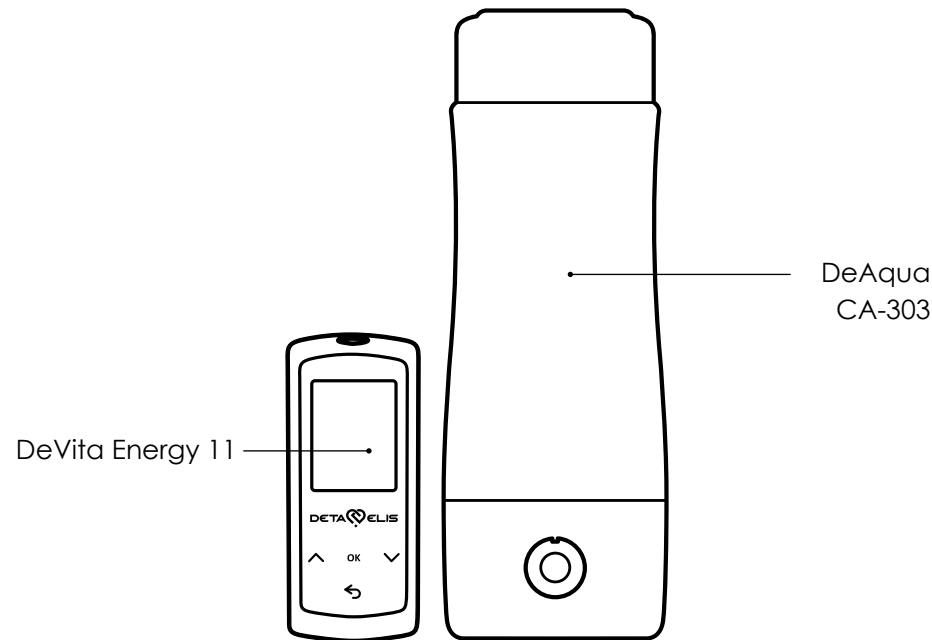


HYDROGEN WATER GENERATOR

USER'S MANUAL

Carefully
read the following instructions
before use

PRODUCT STRUCTURE

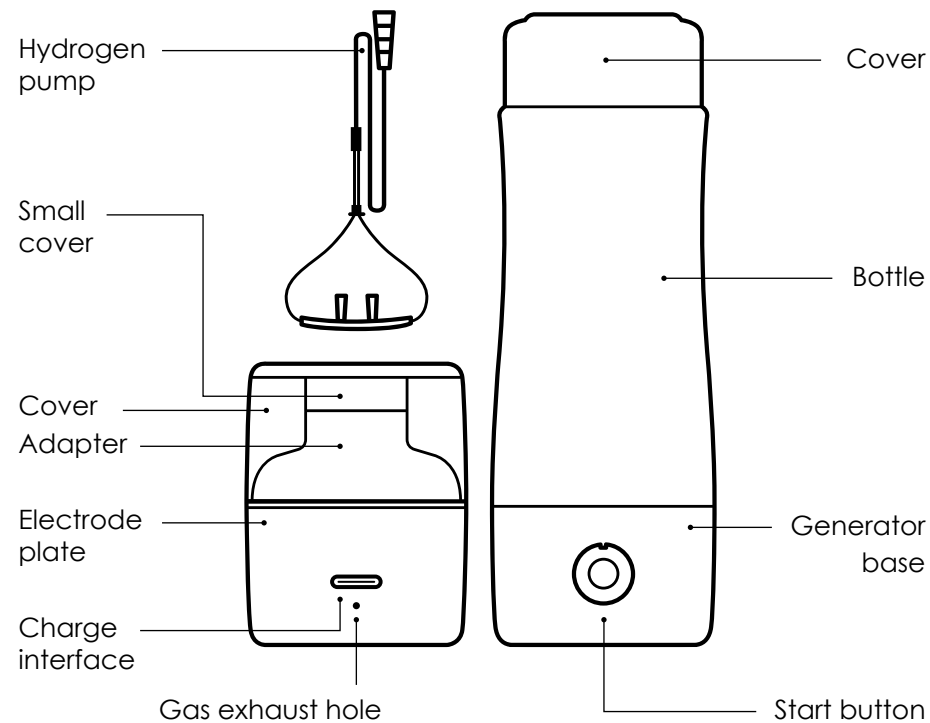

PRODUCT PARAMETER

Product name	Hydrogen water generator
Model	CA-303
Capacity	450 ml
Net weight	410 g
Size	Diameter: 75±1mm, Height: 215±3mm
Working time	Press start button twice to electrolysis 5 minutes, press start button three times to electrolysis 10 minutes
1Battery	Polymer lithium battery
Battery capacity	1400 mAh
Charging time	About 4 hours
Power input	AC100-240V/50-60Hz
Power output	DC5V/1A
Working times	8~10 times, depending on water quality

Concentration	Performing electrolysis once, the hydrogen concentration can reach up to 900~1000ppb, while performing electrolysis several times, the concentration can reach even higher levels.
ORP	Starts from -450mV
Base and covers	ABS
Bottle	Pyrex glass/PC
Electrolysis plate	Titanium base + platinum coating
Membrane	Japanese ionic membrane
Water temperature restrictions	From +5 °C to +60 °C
CE certificate number	WSCT16011342S&E
Order number for CE certification	WSCT-HA-2016090

PRODUCT ADVANTAGES



SAFE

Does not produce harmful gases



PORTABLE

Suitable for travel, work, sports



HIGH-QUALITY

Corrosion and scratch resistant titanium plate with titanium electrode and platinum plated



DURABILITY

High-quality alloy technology, the bottle lasts a long time and does not leak




CERTIFIED


International Certification: Japanese Hydrogen Test Report, CE

INSTALL WITH GENERATOR BOTTLE

1. Take out the generator base, bottle and cover from packing box.

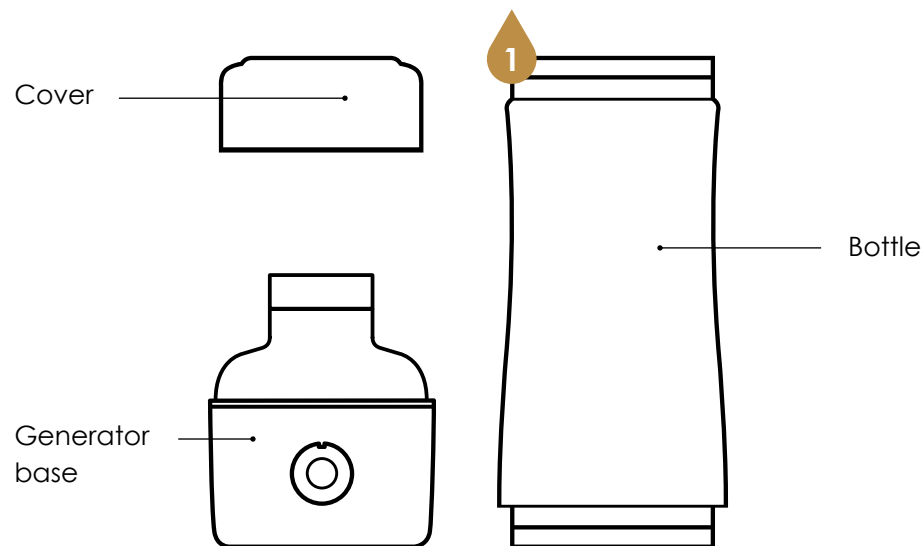


2. Remove the mineral water bottle adapter from generator base.
3. Rotate to install bottle with generator base, please make sure the bottle and base are connect with each other tightly.

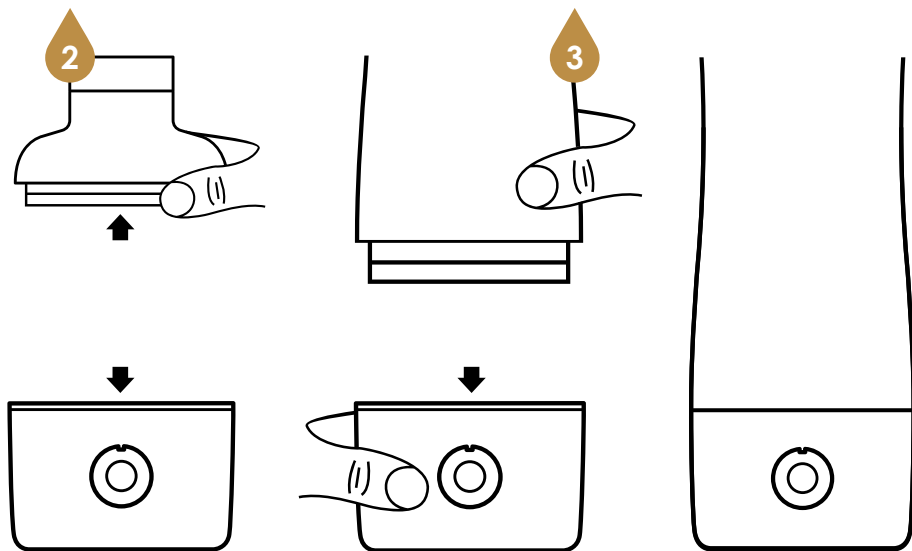

INSTALL WITH MINERAL WATER BOTTLE


1. Rotate and remove the generator bottle from base and then install mineral water bottle adapter with base. And then open the small cover of adapter.

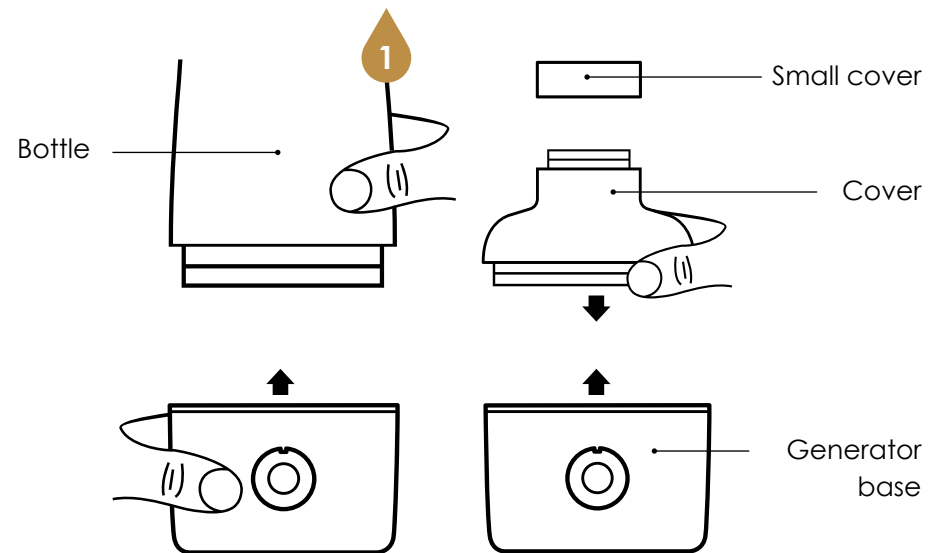

2. Open the cap of the plastic water bottle.

Attention! Make sure the bottle is not full. Leave 2-3 cm of free air space as during the electrolysis process, the bottle is filled with gas.


3. Turn the base upside down and connect it with mineral water bottle, makes sure they are connect with each other tightly.

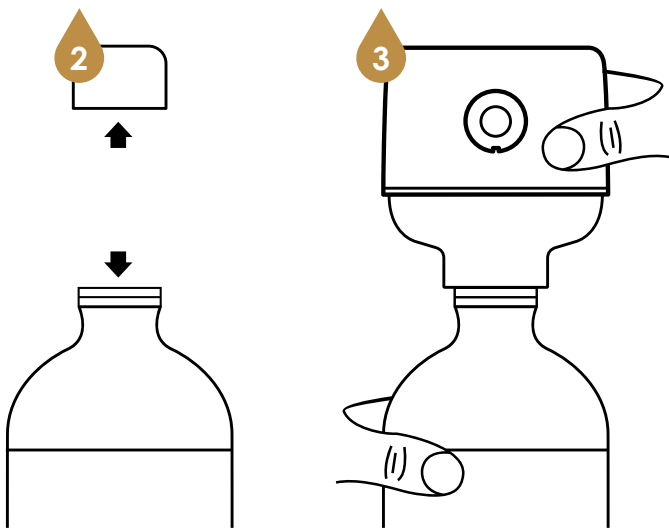

4. Turn it upside down again to its normal position.


IMPORTANT: Small adapter is for small size bottle mouth.

Standard adapter is for most mineral bottles available on the market.

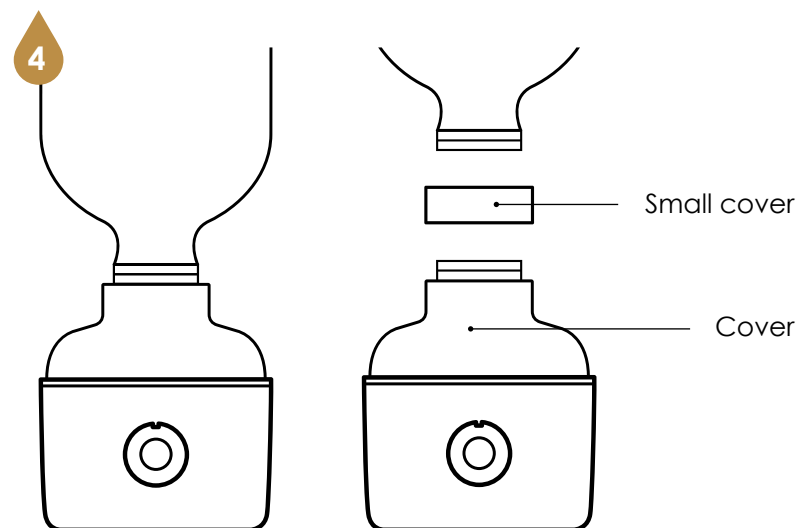


INSTALL WITH HYDROGEN PUMP

1. Take out the generator base, bottle and small cover from packing box.
2. Install the black rubber connector of hydrogen sucker with adapter, make sure they are connected with each other tightly.

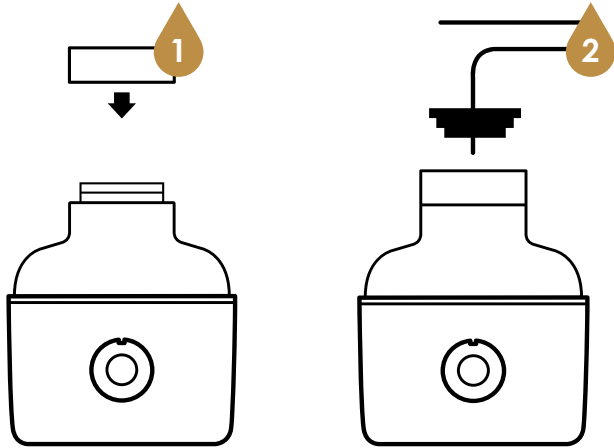

MAKING HYDROGEN WATER


1. **TURN ON.** Press the start button twice and the generator will perform electrolysis for 5 minutes, press start button 3 times it will perform electrolysis for 10 minutes.
2. **TURN OFF.** After 5 or 10 minutes, the generator will stop automatically. If you need to stop generation manually, press the start button once during electrolysis.

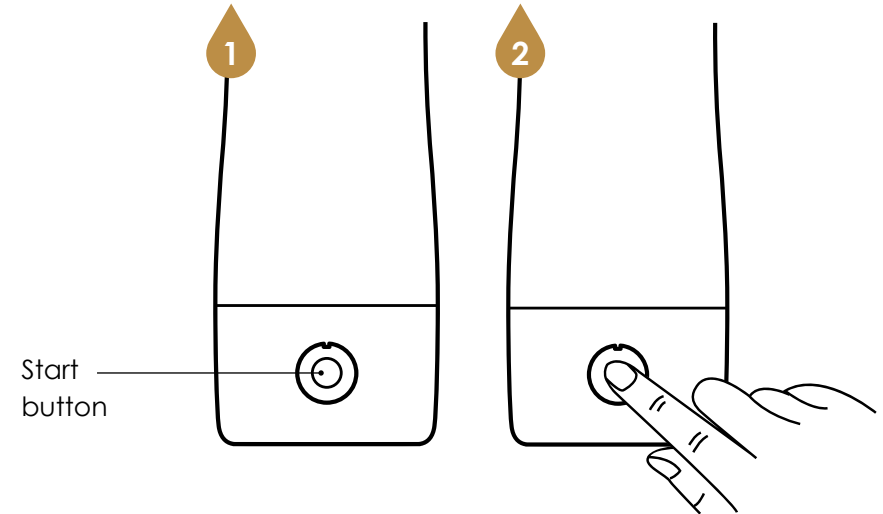

3. **WORKING.** The LED at the base is blue during working, LED turn into red during charging, and it will become green when the battery is full.

During electrolysis, if the LED blinks red, it indicates that the generator is low on battery, please charge it.

Red LED shows that the charging process is on. Green LED shows that the device is fully charged.

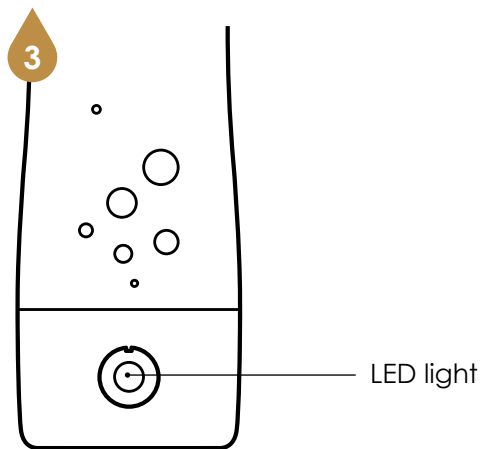


MAKING OZONE WATER (NON-DRINKABLE)

1. **TURN ON.** Long press the start button until the generator makes a «beep beep» sound.


2. **TURN OFF.** After 5 minutes, the warning sound stops and the generator will stop the electrolysis at the same time.

3. **WORKING.** The generator will be making sound and blinking with blue and red lights during the whole process.

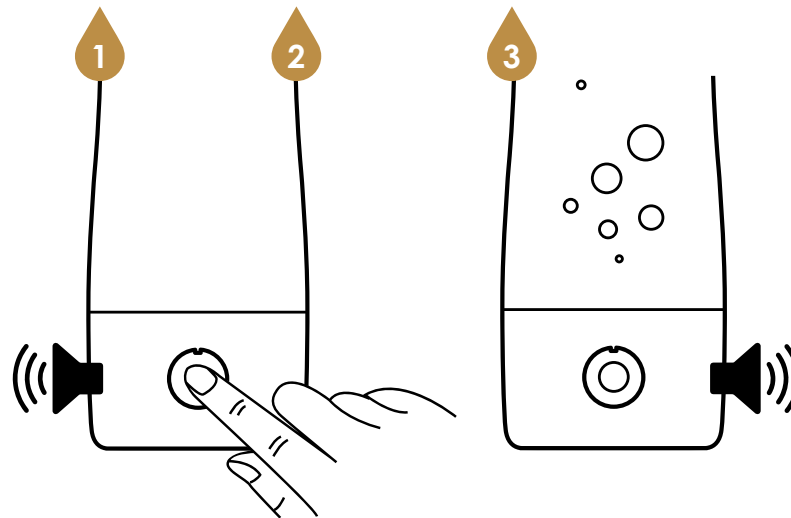

INSTALL WITH MOLECULAR-HYDROGEN INHALER


1. **TURN ON.** Connect the hydrogen pump adapter to the black rubber connector. Place them on the generator and make sure they are tightly connected to each other. Pour some water into the generator so that the hydrogen pump adapter does not touch the water. Attach a hydrogen pump to it.

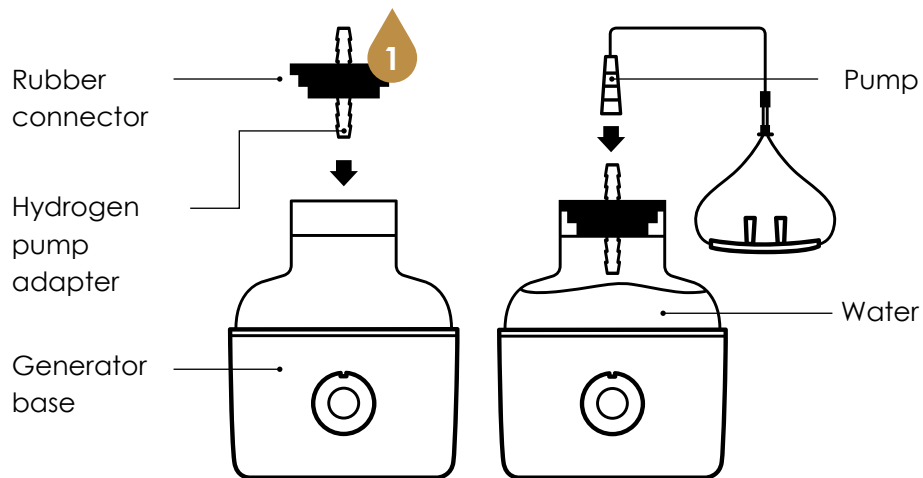

INHALATION

2. **TURN OFF.** After 10 minutes, the generator will automatically stop. If you need to stop the generation manually, press the start button once during inhalation.

3. **WORKING.** Insert the inhalation tubes into your nose. Press the start button three times to start the generator inhalation. Molecular hydrogen inhalation takes 10 minutes, which is enough for a full session.

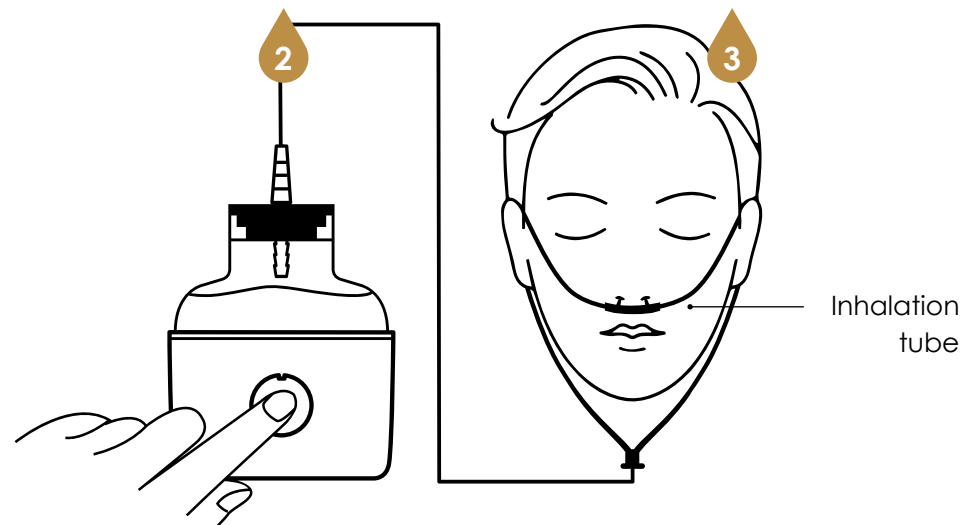


HYDROGEN WATER GENERATOR

HOW TO CHARGE

When LED light at the bottom of the base blinks red, please charge the generator.

Plug the USB Male cable into the adapter.

The LED indicator glows red while charging. When the LED indicator turns green - it means that the device is fully charged, disconnect the cable from the device.

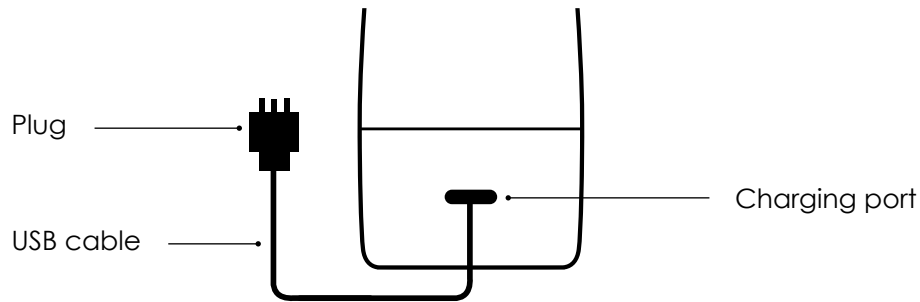

MAINTENANCE

If after using it for some time you find a white coating on the body and base, pour warm water into the bottle so that the water covers the coating, and then add 1-2 teaspoons of citric acid (powder). Wait 30-40 minutes, then rinse the case with clean water. If the plaque is not completely clear, repeat the procedure. Timely cleaning of plaque will extend the life of the generator.

The temperature of the water that is poured into the generator should not exceed 95 ° C. Otherwise, hot water can damage the generator components.

3. When the hydrogen generator is not in use for a long time, please put some purified water in the generator and cover the Electrolysis Plate Cover to keep the electrolysis plate wet. Otherwise, the ion membrane inside will become invalid due to being dry for a long time.

ATTENTION!



Available water source: Water source should conform to the Standards for Drinking Water Quality. We recommend that you use bottled or filtered water. Do not put in any juice, tea or milk, or else it may damage the electrolysis plate.



Do not put in any conductive metal or liquid.



Before using this generator, please use warm water ($\leq 95\text{ }^{\circ}\text{C}$) to clean it once or twice. Then put warm water ($\leq 95\text{ }^{\circ}\text{C}$) in and let it work for 2~3 times. Pour away this water and you can start to use the generator normally. Always leave a small amount of water in the generator bottle to avoid the ionic membrane drying.



Before using the generator for the first time, charge it until the GREEN LED turns on.



Keep the generator on a stable surface during use.



Please do not use the generator near fire.



It is not recommended to do the electrolysis more than 3 times in a row on the same water.


HYDROGEN WATER GENERATOR

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
There is some water on the electrolysis plate when user opens the electrolysis plate cover for the first time he/she uses the generator.	It is a normal phenomenon. To avoid drying out of the membrane, always add a small amount of clean water.
Water leakage.	Make sure the body and base are tight. Open the case slightly and then close it tightly again. If leakage still occurs, check if there are rubber gaskets in the base and cover, if not, contact the service center.
During electrolysis, there are hydrogen bubbles but the LED light does not work.	LED light breaks down. Contact the service center.

PROBLEM	SOLUTION
Little or no bubbles are released during electrolysis.	If the generator was inoperative for a long time and without water, this could lead to the drying out of the ion membrane and reducing the efficiency of the generator. Perform the electrolysis session 1 or 2 times. If there are still few bubbles, use water at a temperature of about 50 ° C, which will speed up the saturation of the membrane. If the situation does not change, fill the bottle with warm water up to half its volume and leave for 24 hours. If you have any questions, please contact the service center.
LED light is off after you press the ON/OFF button.	If you press the ON / OFF button when the generator is fully charged, but it does not start working, contact the service center for assistance.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

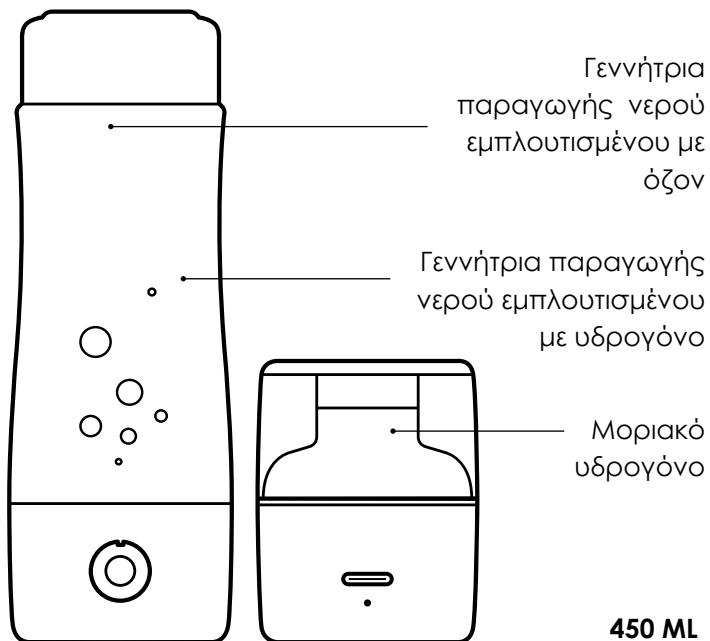

1. ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΝΕΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ. Το υδρογονωμένο νερό εκκινεί τις διαδικασίες αναγέννησης του σώματος, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και αφαιρεί τις τοξίνες. Το υδρογόνο είναι το μόνο αντιοξειδωτικό που μπορεί εύκολα λόγω του μικρού ατομικού του βάρους (1) να εισχωρήσει στις κυτταρικές μεμβράνες, με αποτέλεσμα να αναζωογονεί και να αποκαθιστά κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη από τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες. Συμβάλλει επίσης στην παροχή θρεπτικών ουσιών σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας, ομαλοποιώντας τις λειτουργίες και τις μεταβολικές διαδικασίες του.

ΤΟ ΔΕΑQUA ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ -450MV. Το νερό, που προσφέρει στον οργανισμό ενέργεια και ευεξία, πρέπει να έχει αρνητικό δυναμικό μείωσης οξείδωσης (ORP), ενώ το ORP του νερού βρύσης και του εμφιαλωμένου νερού κυμαίνεται από +80 έως +600 mV. Το νερό, αφού εμπλουτιστεί με υδρογόνο, αποκτά αρνητικό ORP και κατέχει πλέον μεγάλη αντιοξειδωτική δυνατότητα, με αποτέλεσμα να βελτιώνει την αντίσταση του οργανισμού, να προάγει την αναγέννηση ιστών και κυττάρων, να βελτιώνει το μεταβολισμό και να προσδίδει επιπλέον ενέργεια.

Το υδρογονωμένο νερό μειώνει τις αλλεργικές αντιδράσεις, βελτιώνει τη μνήμη, ομαλοποιεί την αρτηριακή πίεση, ενισχύει τα οστά και τις αρθρώσεις, μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα, μειώνει την ευαισθησία στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ανακουφίζει από τη χρόνια κόπωση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΟΖΟΝ (μη πόσιμο). Το εμπλουτισμένο νερό με όζον είναι αντισηπτικό, όξινο, ανενεργό νερό, βακτηριοκτόνο. Τέτοιο νερό μπορεί να αντικαταστήσει το ιώδιο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Επιβραδύνει τις βιολογικές διαδικασίες και ενεργοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 99,9% ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Το όξινο νερό είναι ένα εξαιρετικό φυσικό απολυμαντικό. Αυτό το νερό καταστρέφει μικρά παράσιτα, μικρόβια, βακτήρια, μύκητες. Απολυμαίνει εξαιρετικά το έδαφος, τα φρέσκα λαχανικά, τα φρούτα και πολλά άλλα.

Το αντισηπτικό νερό θεραπεύει πληγές, διαλύει τις τοξίνες και τα απόβλητα αφαιρώντας τα από τον οργανισμό, βοηθά στην καταπολέμηση των λοιμώξεων, διαλύει σταδιακά την πέτρα στα δόντια, αντιμετωπίζει γρήγορα τη ρινική καταρροή και τις λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού, καθαρίζει απαλά το δέρμα και του δίνει τόνο, ελαστικότητα και φρεσκάδα.

3. ΕΙΣΠΝΟΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Η διαδικασία εισπνοής υδρογόνου (H₂) πραγματοποιείται με την χρήση μιας ρινικής μάσκας συνδεδεμένης με την γεννήτρια.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (H₂). Το H₂ είναι ένα μικρό μόριο που είναι ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό και έχει μοναδικές ιδιότητες που το καθιστούν ανεκτίμητο για την υγεία μας. Όταν εισπνέεται, το μοριακό υδρογόνο απορροφάται σε μεγάλες ποσότητες από τους πνεύμονες, καθώς και από τον εγκέφαλο, το νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Το αέριο υδρογόνο είναι ένα βιολογικά ενεργό μόριο που έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, όπως αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές. Απομακρύνει με ασφάλεια τα υποπροϊόντα οξυγόνου που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού και καταστρέφει τα οξειδωμένα κύτταρα του οργανισμού, που οδηγούν τόσο στην εμφάνιση μιας ποικιλίας ασθενειών όσο και στην πρόωρη γήρανση.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ


ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DEVITA

Για ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την
τεχνολογία DeAqua μαζί με τη συσκευή DeVita Energy
11 από την εταιρία DEHolding



ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΜΙΑΣ ΥΓΙΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ DEHOLDING

Αυτός ο συνδυασμός σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε περαιτέρω το
νερό, εφαρμόζοντας σε αυτό πολλαπλές συντονισμένες συχνότητες.

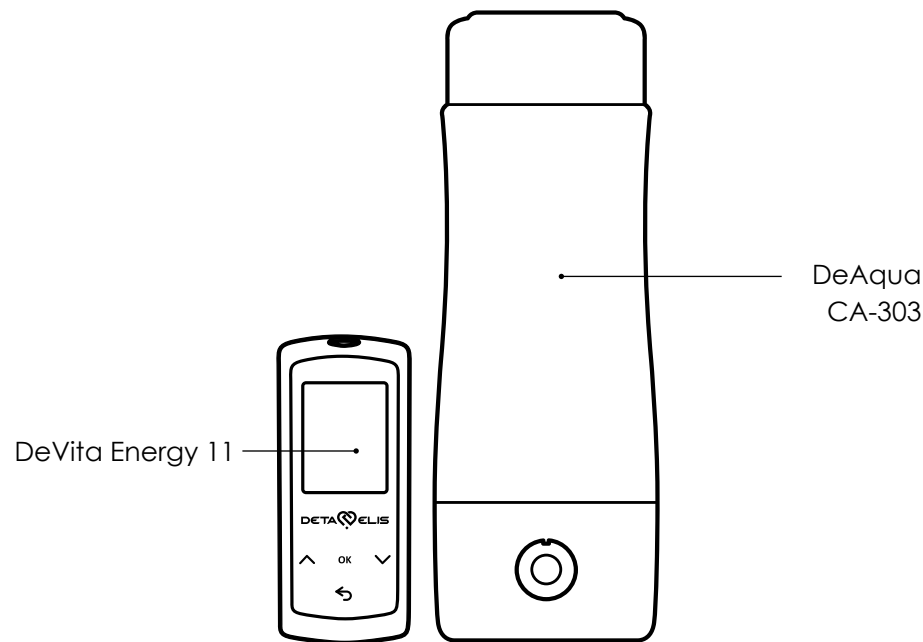


ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά
τις ακόλουθες οδηγίες πριν
από την χρήση

ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

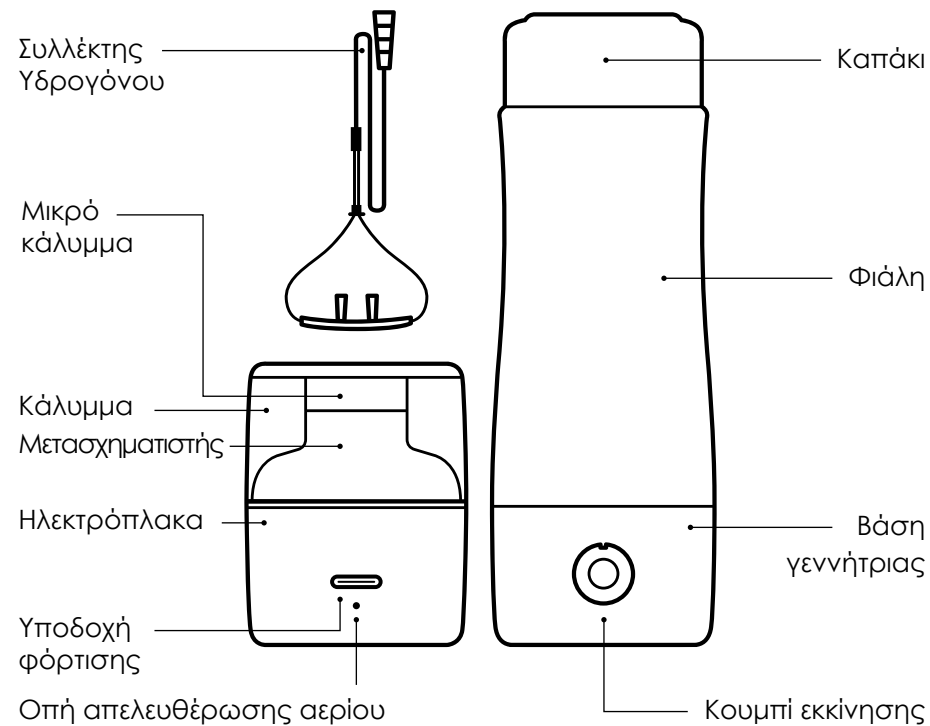

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία Προϊόντος	Γεννήτρια υδρογονωμένου νερού
Χωρητικότητα	450 ml
Βάρος	410 g
Διαστάσεις	75x215 εκ.
Αριθμός λειτουργιών	3
Αντοχή φόρτισης	8-10 ενεργοποιήσεις
Μπαταρία	Μπαταρία πολυμερούς λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	1400 mAh
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 4 ώρες
Δυναμικό μείωσης οξειδωσης	Αρχίζει από -450mV
Συγκέντρωση	Με έναν μόνο κύκλο ηλεκτρόλυσης, η συγκέντρωση σε υδρογόνο μπορεί να φτάσει τα 900-1000 ppb. Με παραπάνω αριθμό κύκλων η συγκέντρωση μπορεί να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα.

Πλήρωση	Ρινική μάσκα απορρόφησης υδρογόνου, περίπου 15-30 ml / h
Καθαρισμός	Δεν απαιτείται Διατίθεται σύστημα αυτοκαθαρισμού
Χώρα παραγωγής μεμβράνης ιόντων	Ιαπωνία
Υλικά βάσης και καλύμματος	ABS
Υλικό φιάλης	Γυαλί Pyrex / PC
Υλικό ηλεκτρόπλακας	Βάση τιτανίου + επιπλατινωμένη
Περιορισμός θερμοκρασίας νερού	Από +5 °C έως +60 °C
Αριθμός πιστοποιητικού CE	WSCT16011342S&E
Αριθμός παραγγελίας πιστοποίησης CE	WSCT-HA-2016090

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χωρίς επιβλαβή αέρια, χωρίς χλώριο, χωρίς οξυγόνο



ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

Κατάλληλο για ταξίδια, δουλειά, αθλητισμό



ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δεν διαβρώνεται, είναι ανθεκτικό στις γρατσουνιές, κατασκευασμένο από πλάκα τιτανίου με ηλεκτρόδια τιτανίου, επιπλατινωμένο



ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τεχνολογία κραμάτων υψηλής ποιότητας, το μπουκάλι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν έχει διαρροές




ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διεθνής πιστοποίηση: Ιαπωνικό πρωτόκολλο χρήσης υδρογόνου, CE


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

1. Αφαιρέστε τη βάση, τη φιάλη και το πώμα της γεννήτριας από το κουτί.

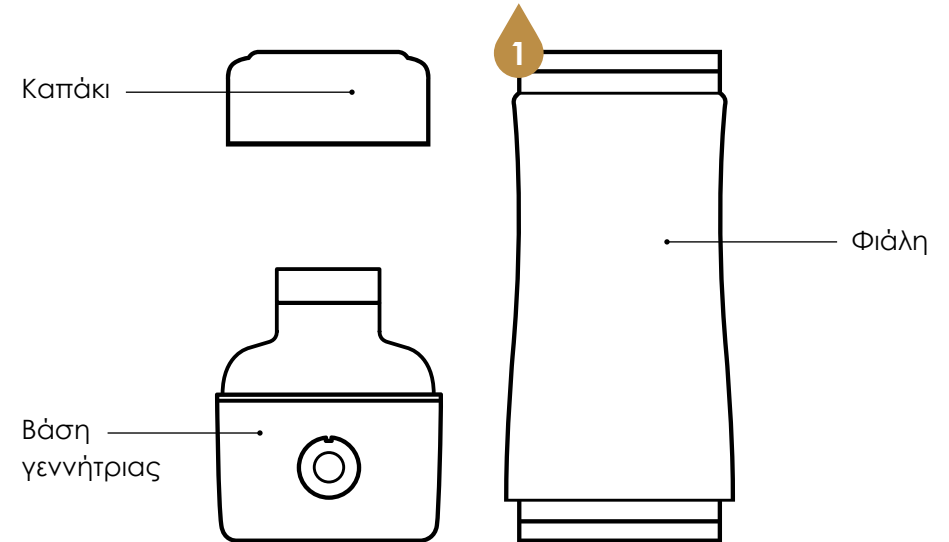


2. Αφαιρέστε τον μετασχηματιστή φιάλης νερού από τη βάση της γεννήτριας.

3. Περιστρέψτε για να τοποθετήσετε τη φιάλη στη βάση της γεννήτριας, βεβαιωθείτε ότι η φιάλη και η βάση είναι σταθερά συνδεδεμένες μεταξύ τους.

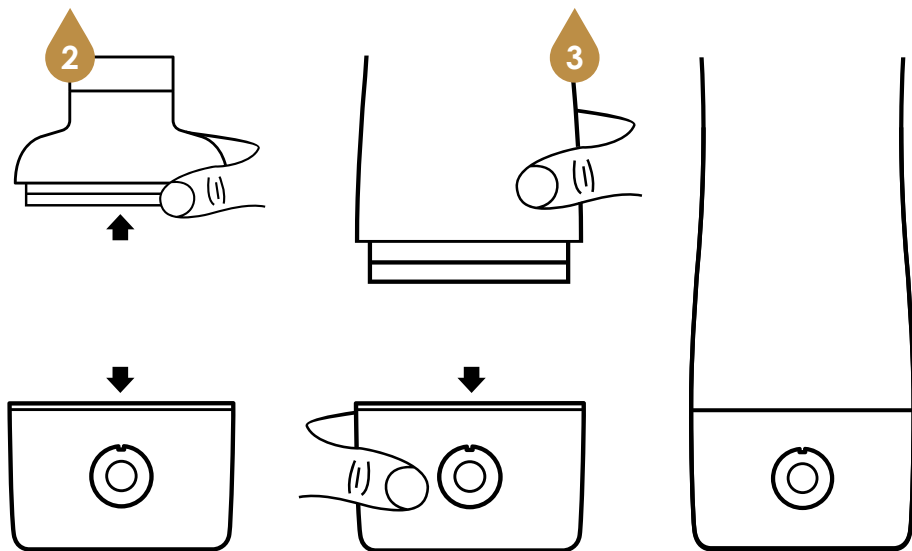


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Περιστρέψτε και αφαιρέστε τη φιάλη από τη βάση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον μετασχηματιστή φιάλης νερού στη βάση. Στη συνέχεια, ανοίξτε το μικρό κάλυμμα του μετασχηματιστή.

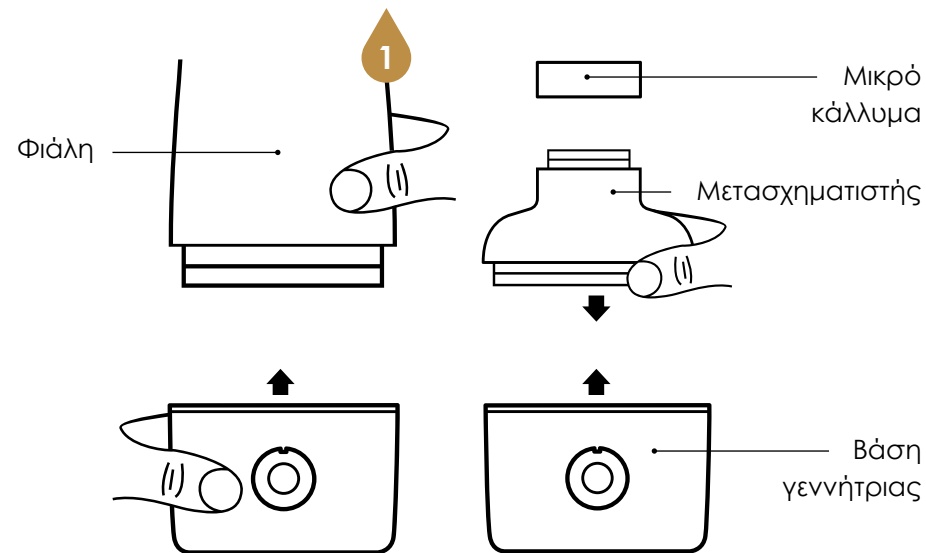

2. Ανοίξτε το καπάκι της πλαστικής φιάλης νερού και βεβαιωθείτε ότι η φιάλη δεν είναι πολύ γεμάτη, διαφορετικά μπορεί να είναι επικίνδυνο επειδή η φιάλη γεμίζει με αέριο κατά την ηλεκτρόλυση.


3. Αναποδογυρίστε τη βάση και συνδέστε τη στην φιάλη νερού, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

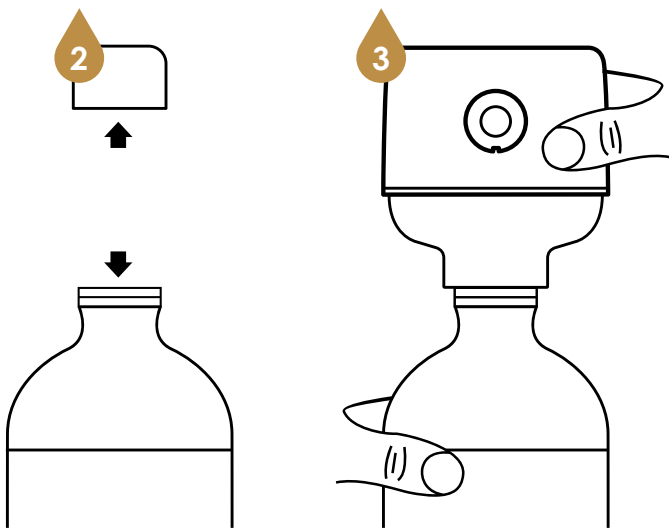

4. Αναποδογυρίστε το ξανά, επιστρέφοντας την συσκευή στην κανονική της θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μικρός μετασχηματιστής προορίζεται για το στόμιο ενός μικρού μπουκαλιού.


Ο τυπικός μετασχηματιστής ταιριάζει στα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια στην παγκόσμια αγορά.

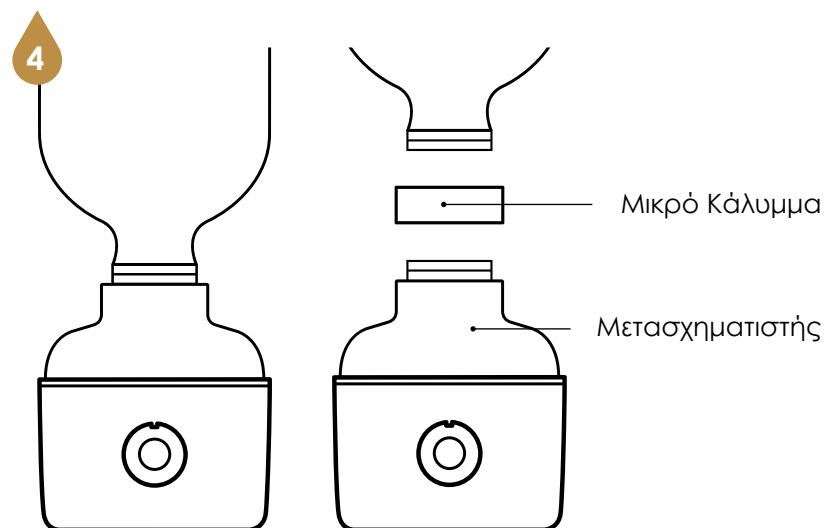

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

1. Αφαιρέστε τη βάση της γεννήτριας, το μπουκάλι και το πώμα από το κουτί.


2. Συνδέστε τον μαύρο ελαστικό σύνδεσμο του συλλέκτη υδρογόνου με τον μετασχηματιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

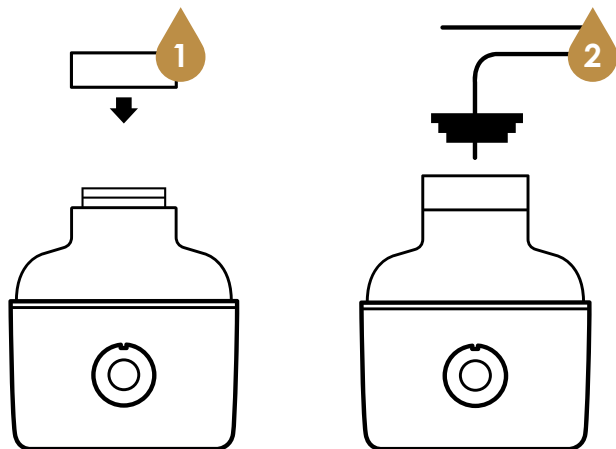

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.** Πατήστε το κουμπί εκκίνησης δύο φορές για 5 λεπτά ηλεκτρόλυσης, πατήστε το κουμπί εκκίνησης 3 φορές για 10 λεπτά ηλεκτρόλυσης.


2. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.** Η γεννήτρια θα σταματήσει αυτόματα μετά από 5 ή 10 λεπτά. Εάν πρέπει να σταματήσετε χειροκίνητα τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί εκκίνησης μία φορά κατά την ηλεκτρόλυση.

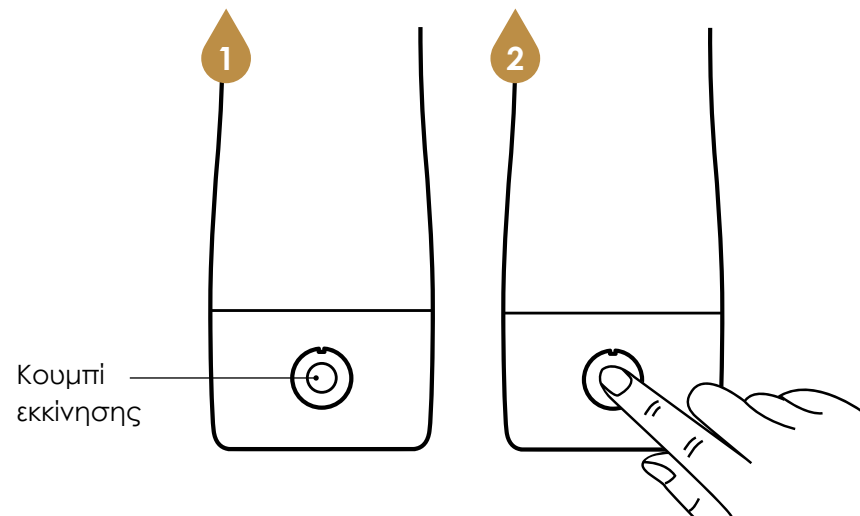

3. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.** Η λυχνία LED στη βάση ανάβει με μπλε χρώμα κατά τη λειτουργία, γίνεται κόκκινη κατά τη φόρτιση και πράσινη όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά την ηλεκτρόλυση, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία στη γεννήτρια έχει αποφορτιστεί, φορτίστε την.

Το κόκκινο χρώμα δείχνει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη και το πράσινο δείχνει ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

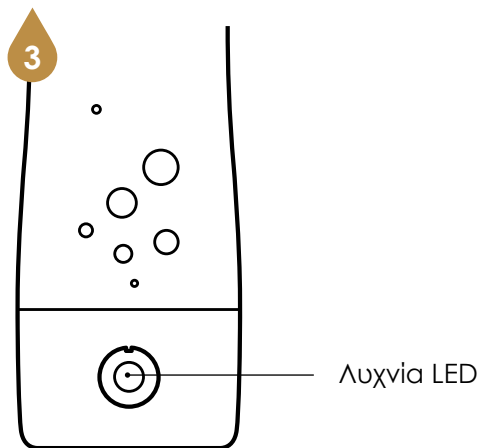


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΖΟΝ (ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ)

1. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΗ.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης μέχρι να ακουστεί ένας ήχος από τη γεννήτρια.


2. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.** Μετά από 5 λεπτά, ο ήχος θα σταματήσει, ταυτόχρονα η γεννήτρια θα σταματήσει την διαδικασία.

3. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.** Η γεννήτρια θα ηχεί και η λυχνία θα αναβοσβήνει με κόκκινο-μπλε χρώμα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

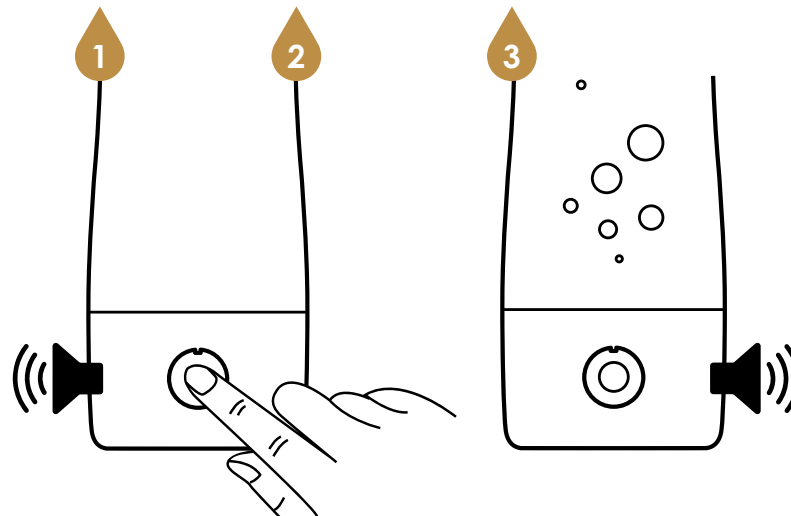

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ


1. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.** Συνδέστε τον προσαρμογέα αντλίας υδρογόνου στο μαύρο συνδετήρα από καουτσούκ. Ρυθμίστε τη γεννήτρια και βεβαιωθείτε ότι είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ρίξτε λίγο νερό στη γεννήτρια, έτσι ώστε ο προσαρμογέας αντλίας υδρογόνου να μην αγγίζει το νερό. Συνδέστε την αντλία υδρογόνου σε αυτήν.

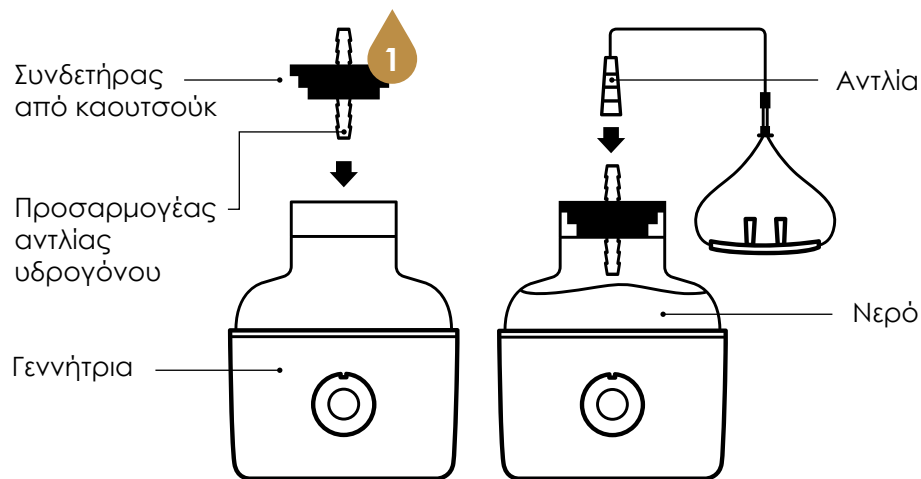

ΕΙΣΠΝΟΗ

2. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.** Μετά από 10 λεπτά, η γεννήτρια θα σταματήσει αυτόματα. Εάν πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί έναρξης μία φορά κατά την εισπνοή.

3. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.** Τοποθετήστε τους σωλήνες εισπνοής στη μύτη σας. Πατήστε το κουμπί έναρξης τρεις φορές για να ξεκινήσετε την εισπνοή της γεννήτριας. Η εισπνοή μοριακού υδρογόνου διαρκεί 10 λεπτά, το οποίο είναι αρκετό για μια πλήρη συνεδρία.

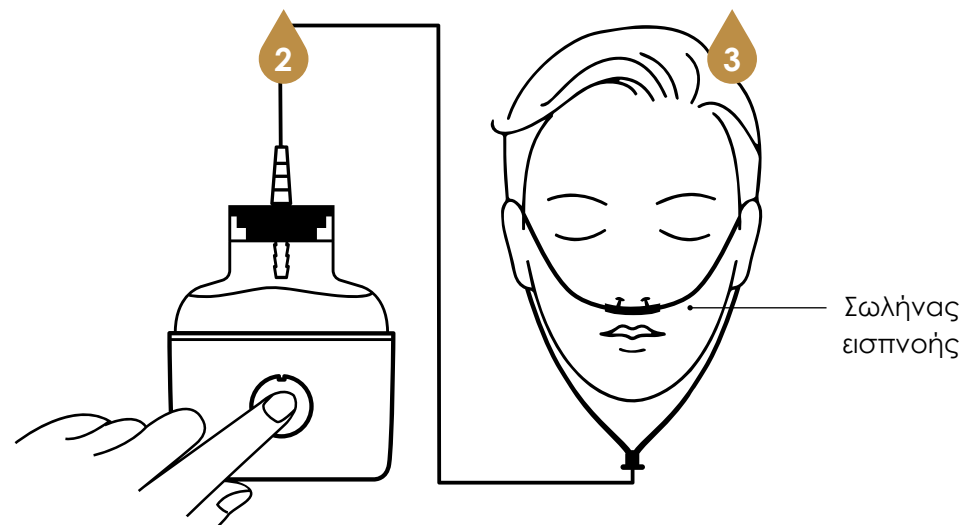


ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Όταν το LED στο κάτω μέρος της συσκευής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε τη γεννήτρια. Συνδέστε το καλώδιο USB στην διεπαφή φόρτισης στο κάτω μέρος της βάσης.

Συνδέστε το βύσμα σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.

Η ένδειξη LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED γίνει πράσινη σημαίνει ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, τότε βγάλτε το καλώδιο.

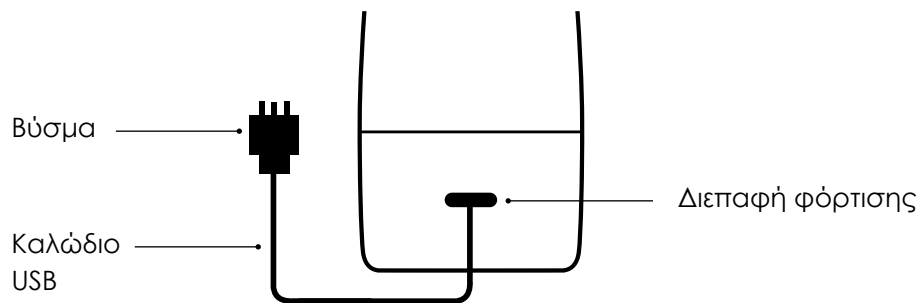

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Εάν μετά την χρήση, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα παρατηρήσετε ένα λευκό κατάλειμμα στον κορμό και την βάση της συσκευής, γεμίστε την φιάλη με ζεστό νερό μέχρι να καλυφθεί η πλάκα, και έπειτα προσθέστε λίγο ξίδι ή κιτρικό οξύ στο ζεστό νερό. Περιμένετε λίγη ώρα και μετά ξεπλύντε τον κορμό με καθαρό νερό. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την φθορά και να παρατείνει την διάρκεια ζωής της γεννήτριας.

2. Η θερμοκρασία του νερού που τοποιοθετείται στη γεννήτρια πρέπει να είναι κάτω από 95 °C. Διαφορετικά, το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα της γεννήτριας.

3. Εάν η γεννήτρια υδρογόνου δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρίξτε λίγο καθαρό νερό στη γεννήτρια και καλύψτε το κάλυμμα της πλάκας ηλεκτρόλυσης για να διατηρήσετε την πλάκα ηλεκτρόλυσης υγρή. Διαφορετικά, η ιοντική μεμβράνη θα πάψει να είναι λειτουργική λόγω παρατεταμένης ξήρανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η πηγή νερού πρέπει να πληρεί τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο, αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Μην χρησιμοποιείτε χυμό, τσάι ή γάλα καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στην πλάκα ηλεκτρόλυσης.



Μην τοποθετείτε αγώγιμα μέταλλα ή υγρά.



Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη γεννήτρια, ξεπλύνετε την μία ή δύο φορές με ζεστό νερό ($\leq 95^{\circ}\text{C}$). Στη συνέχεια ρίξτε ζεστό νερό ($\leq 95^{\circ}\text{C}$) και ενεργοποιήστε τη συσκευή 2 ~ 3 φορές. Στραγγίστε αυτό το νερό και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια κανονικά. Διατηρήστε την πλάκα ηλεκτρόλυσης υγρή κατά την καθημερινή χρήση για να αποφύγετε προβλήματα που προκαλούνται από την πιθανή ξήρανση της μεμβράνης ιόντων.



Πριν χρησιμοποιήσετε τη γεννήτρια για πρώτη φορά, φορτίστε την έως ότου ανάψει η λυχνία LED με πράσινο χρώμα.



Όταν χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια, τοποθετήστε την σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.



Μην χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια νερού υδρογόνου κοντά σε φωτιά.



Όταν ρίχνετε λίγο νερό στη γεννήτρια, μην την αφήσετε να λειτουργήσει περισσότερες από 3 φορές με το ίδιο νερό. Διαφορετικά, το νερό θα εξατμιστεί από την οπή απελευθέρωσης αερίου, λόγω της υψηλής πίεσης του αέρα στο εσωτερικό.


Γ Ε Ν Ν Η Τ Ρ Ι Α Υ Δ Ρ Ο Γ Ο Ν Ω Μ Ε Ν Ο Υ Ν Ε Ρ Ο Υ

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Υπάρχει λίγο νερό στην πλάκα ηλεκτρόλυσης όταν ο χρήστης ανοίγει το κάλυμμα της πλάκας ηλεκτρόλυσης όταν χρησιμοποιεί τη γεννήτρια για πρώτη φορά.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Προσθέτουμε λίγο καθαρό νερό στην πλάκα ηλεκτρόλυσης για να αποφευχθεί η ξήρανση της μεμβράνης ιόντων και η καταστροφή της γεννήτριας.
Διαρροή νερού.	Βεβαιωθείτε ότι το σώμα και η βάση είναι σφικτά συνδεδεμένα. Μπορείτε να ξεσφίξετε το σώμα και στη συνέχεια να το σφίξετε ξανά. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαρροή, ελέγξτε εάν υπάρχουν παρεμβύσματα από καουτσούκ στη βάση και το κάλυμμα, εάν δεν υπάρχουν ή λείπουν ορισμένα παρεμβύσματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να τα αγοράσετε.
Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης, εμφανίζονται φυσαλίδες υδρογόνου, αλλά η λυχνία LED δεν λειτουργεί.	Η λυχνία LED δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Υπάρχουν λίγες φυσαλίδες κατά την ηλεκτρόλυση.	Όταν η γεννήτρια υδρογονωμένου νερού χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η μεμβράνη ιόντων είναι στεγνή και το φαινόμενο διείσδυσης μπορεί να μην είναι ιδανικό, επομένως μπορεί να οδηγήσει σε μικρή ποσότητα φυσαλίδων και χαμηλή συγκέντρωση υδρογόνου. Αλλά μετά από 1-2 φορές ηλεκτρόλυσης, αυτό θα αποκατασταθεί. Εάν μετά την επανάληψη οι φυσαλίδες ηλεκτρόλυσης είναι ακόμα λίγες, χρησιμοποιήστε νερό με θερμοκρασία περίπου 50 °C, καθώς το ζεστό νερό θα επιταχύνει τον κορεσμό της μεμβράνης ιόντων. Εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, γεμίστε την φιάλη μέχρι την μέση με νερό και αφήστε το 8-24 ώρες για να βραχεί πλήρως η ιοντική μεμβράνη. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.
Η λυχνία LED σβήνει αφού πατήσετε το κουμπί ON / OFF.	Ελέγξτε εάν η γεννήτρια έχει ξεφορτίσει. Εάν ναι, φορτίστε την συσκευή. Εάν πατήσετε το κουμπί ON / OFF όταν η γεννήτρια είναι πλήρως φορτισμένη αλλά η γεννήτρια δεν ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.

ANWENDUNGSARTEN

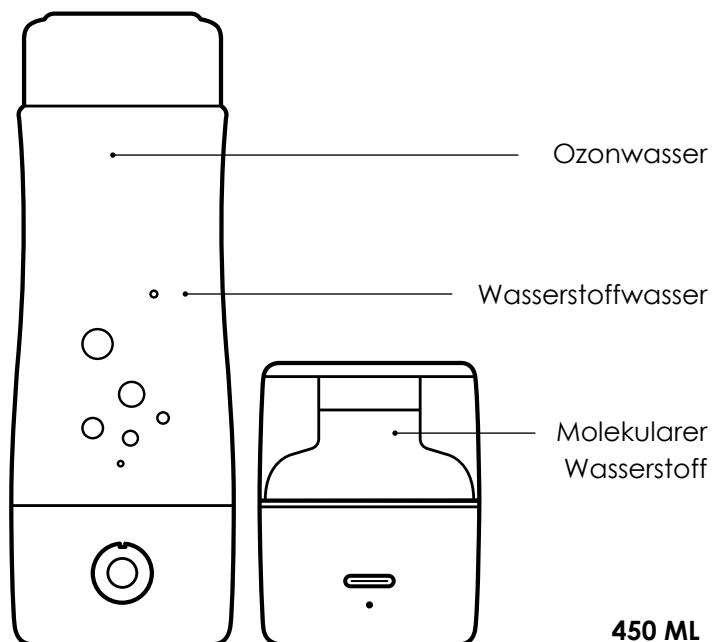

1. MOLEKULARES WASSERSTOFFWASSER

MIT WASSERSTOFF ANGEREICHERTES WASSER. Wasserstoffwasser stimuliert Regenerationsprozesse im Körper, neutralisiert die freien Radikale und entgiftet. Der Wasserstoff ist das einzige Antioxidans, das das Blut leicht durchdringen und Oxidantien im Gehirn beseitigen kann. Außerdem fördert er den Nährstofftransport in alle Zellen unseres Körpers und normalisiert die Körperfunktionen sowie die Stoffwechselprozesse.

DEAQUA HAT EIN OXIDATIONSREDUZIERUNGSPOTENZIAL, DAS BEI -450 MV BEGINNT. Das Wasser, das als Energie- und Gesundheitsquelle dienen soll, muss ein negatives Redoxpotential haben. Das Redoxpotential (ORP) in Leitungswasser und Flaschenwasser liegt innerhalb von +80 und +600 mV. Wenn das Wasser ein negatives Redoxpotential hat, verbessert es die Immunabwehr des Körpers, trägt zur Regeneration des Gewebes sowie der Zellen bei, verbessert den Stoffwechsel und liefert Energie.

Wasserstoffwasser lindert allergische Reaktionen, verbessert die Gedächtnisleistung, reguliert den Blutdruck, stärkt Knochen und Gelenke, senkt den Blut- und Cholesterinspiegel, lindert Wetterfühligkeitssymptome, beseitigt das chronische Erschöpfungssyndrom und stärkt die Immunabwehr.

2. OZONWASSER

AKTIVIERT OZONWASSER (NICHT TRINKBAR). Ozonwasser ist säurehaltiges und totes Wasser, das antiseptisch und bakterizid wirkt. Dieses Wasser kann Antiseptika wie die Iod-Kaliumiodid-Lösung und Wasserstoffperoxid ersetzen. Es verlangsamt biologische Prozesse und aktiviert den Zellstoffwechsel.

TÖTET BIS ZU 99,9% BAKTERIEN AB. Säurehaltiges Wasser ist ein hervorragendes natürliches Desinfektionsmittel. Es tötet kleine Schädlinge, Mikroben, Bakterien sowie Pilze ab. Es ist auch ein effektives Desinfektionsmittel für den Boden, frisches Obst sowie Gemüse und vieles mehr.

Antiseptisches Wasser heilt Wunden, löst Toxine und Giftstoffe auf und fördert die darauffolgende Ausleitung aus dem Körper, hilft bei der Bekämpfung von Infektionen, löst allmählich Zahnstein auf, heilt schnell Schnupfen, Durchfall und Vergiftungen, reinigt sanft die Haut, strafft sie und schenkt ihr Elastizität sowie Frische.

3. MOLEKULARER WASSERSTOFF

BEINHALTET WASSERSTOFFINHALATION. Der Inhalationsvorgang verläuft über das Einatmen von H₂-Wasserstoff über die Nasenbrille, die mit dem Generator verbunden ist.

MIT MOLEKULAREM WASSERSTOFF (H₂) ANGEREICHERTES WASSER. H₂ ist ein kleines und für Menschen gefahrloses Molekül, das einzigartige Eigenschaften besitzt und für unsere Gesundheit wertvoll ist. Bei der Inhalation wird molekularer Wasserstoff in großen Mengen von der Lunge sowie vom Gehirn-, Nerven- und Herz-Kreislauf-System aufgenommen.

Wasserstoff-Gas ist ein biologisch aktives Molekül, das zahlreiche nützliche, unter anderem entzündungshemmende und antioxidative, Eigenschaften hat. Es entfernt sicher Nebenprodukte vom Sauerstoff, die während des Stoffwechselvorgangs entstehen und Zellen durch Oxidation zerstören. Folglich führt es zu verschiedenen Erkrankungen sowie zu einer vorzeitigen Alterung.

BETRACHTEN SIE IHRE GESUNDHEIT GANZHEITLICH


KOMBINIEREN SIE ES MIT DEN
DEVITA-TECHNOLOGIEN

Für beste Ergebnisse kombinieren Sie
das Gerät DeAqua - CA-303 mit dem Gerät
Devita Energy 11 von DEHolding



BRINGEN SIE IHREN KÖRPER AUF EINE
GESUNDE SCHWINGUNG ZUSAMMEN MIT
DEHOLDING

Diese Kombination sorgt durch die Einwirkung der aufeinander
abgestimmten Multifrequenzen für eine zusätzliche Strukturierung des
Wassers.

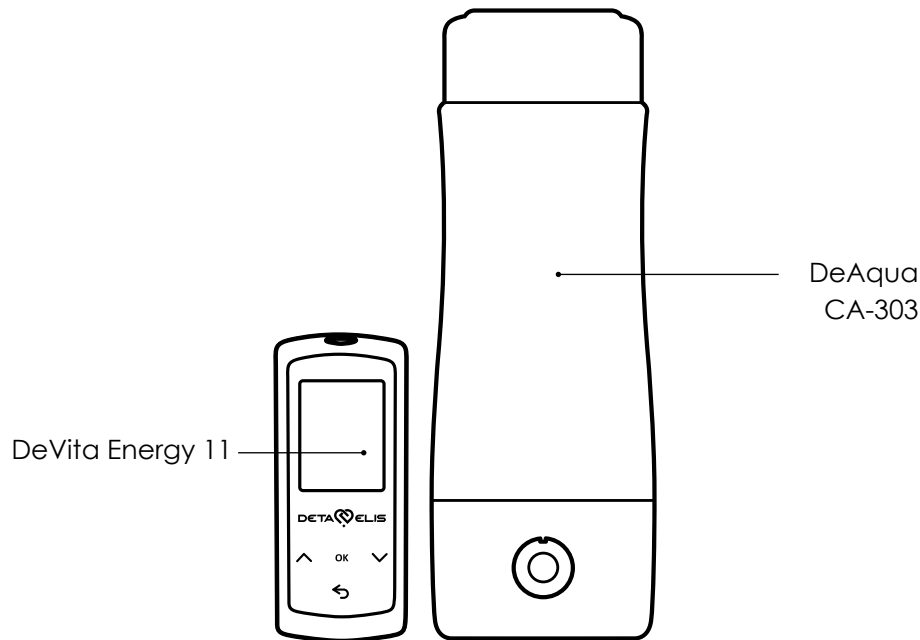


WASSERSTOFFWASSER-GENERATOR

BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Produkt anwenden

GENERATORAUFBAU

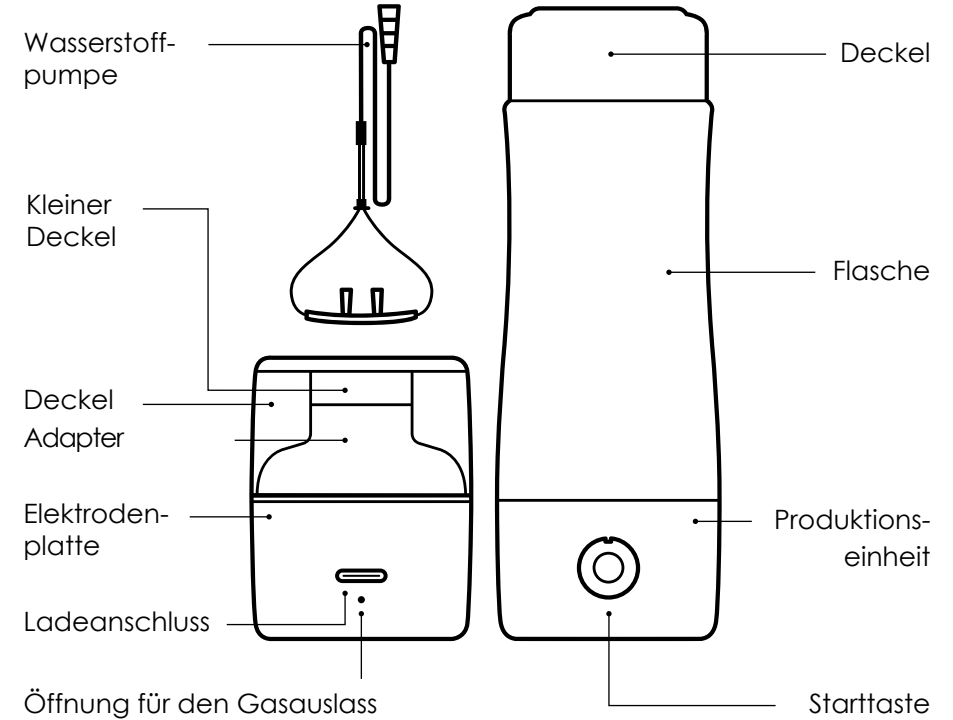

TECHNISCHE DETAILS

Produkt	Wasserstoffwasser-Generator
Produktname	CA-303
Flascheninhalt	450 ml
Nettogewicht	410 g
Abmessungen	Durchmesser: 75 ± 1 mm Höhe: 215 ± 3 mm
Produktionszeit	Drücken Sie die Starttaste, um die 5-minütige Elektrolyse zu starten. Drücken Sie die Starttaste dreimal für die 10-minütige Elektrolyse.
Akkumulator	Lithium-Akkumulator
Akkukapazität	1400 mAh
Ladezeit	ca. 4 Stunden
Eingangsspannung	AC100-240V/50-60Hz
Ausgangsspannung	DC5V/1A
Wasserstoffproduktion - vollgeladen	8 bis 10 Anwendungen je nach Wasserqualität

Konzentration	Bei einmaliger Durchführung der Elektrolyse kann die Wasserstoffkonzentration bis zu 900~1000ppb erreichen, bei mehrmaliger Durchführung der Elektrolyse kann die Konzentration sogar noch höher liegen.
Redoxwert	beginnt bei -450mV
Flaschendeckel und Flaschenboden	ABS-Kunststoff
Flasche	Pyrex/PC Glas
Elektrodenplatte	Platinbeschichtete Titanelektrode
Membran	Japanische Ionenmembran
Wassertemperatur	Zwischen +5 °C und +60 °C
CE Konformitätserklärung	WSCT16011342S&E
Antragsnummer für die CE-Konformitätserklärung	WSCT-HA-2016090

PRODUKTVORTEILE



SICHER

Keine schädigende Gase, kein Chlor



TRAGBAR

Geeignet für Reisen, Sport und auf der Arbeit



HOCHWERTIG

Kratzfeste und korrosionsbeständige Titan-Platte mit der platinbeschichteten Titanelektrode



DAUERHAFT

Hochwertige Legierungstechnologie. Die Flasche ist robust und läuft nicht aus




ZERTIFIZIERT


Internationale Zertifizierung: Japanischer Testbericht zum Wasserstoff, CE

AUFBAU MIT DER GENERATORFLASCHE

1. Nehmen Sie die Produktionseinheit, die Flasche und den Deckel aus der Verpackung.

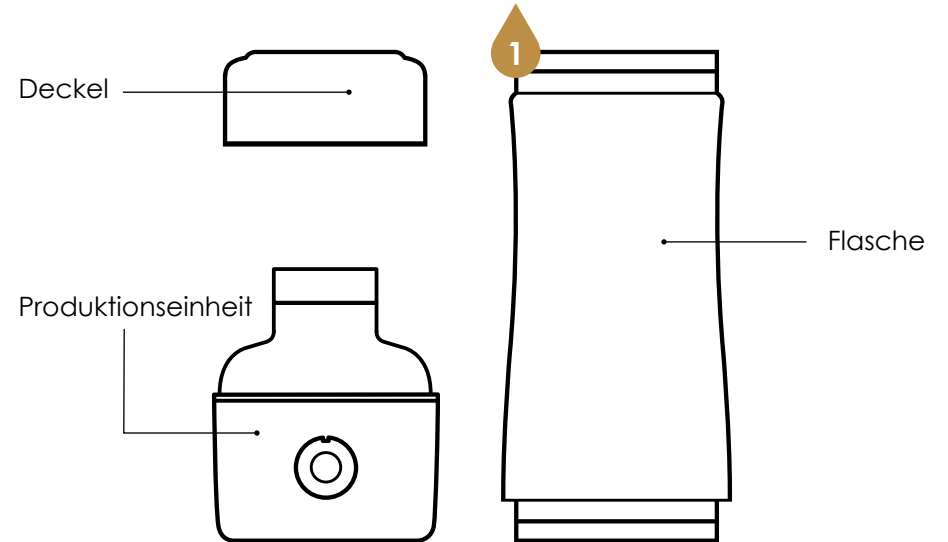


2. Entfernen Sie den Flaschenadapter von der Produktionseinheit.
3. Drehen Sie die Generatorflasche in die Produktionseinheit hinein. Stellen Sie sicher, dass die Flasche und die Produktionseinheit fest miteinander verbunden sind.

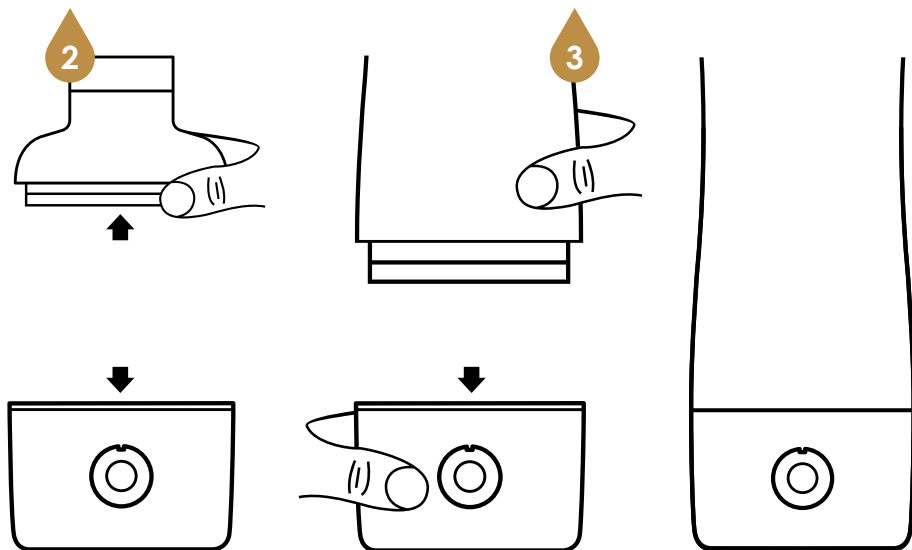


AUFBAU MIT DER WASSERFLASCHE

1. Drehen Sie die Generatorflasche heraus und entfernen Sie diese von der Produktionseinheit. Verbinden Sie nun den Flaschenadapter mit der Produktionseinheit. Öffnen Sie dann den kleinen Deckel des Adapters.

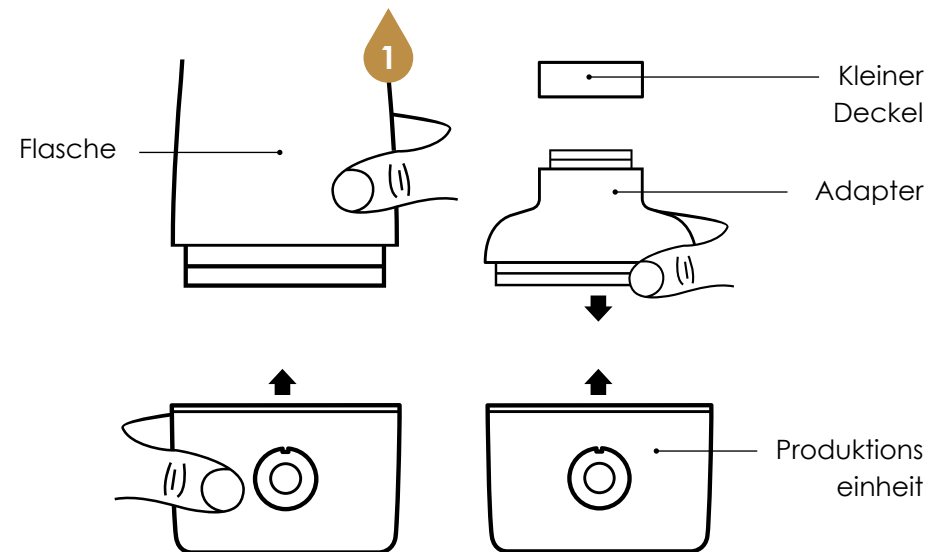

2. Öffnen Sie den Flaschendeckel und stellen Sie sicher, dass die Flasche nicht zu voll ist. Andernfalls kann es gefährlich sein, da die Flasche während der Elektrolyse mit Gas aufgepumpt wird.


3. Stellen Sie die Produktionseinheit auf den Kopf und verbinden Sie sie mit der Wasserflasche. Stellen Sie sicher, dass sie fest miteinander verbunden sind.

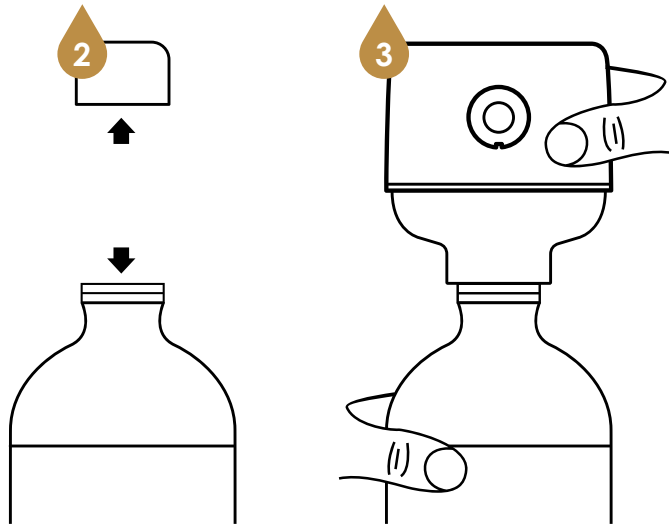

Drehen Sie nun die Flasche um, sodass sich die Produktionseinheit unten befindet.


HINWEISE: Der kleine Adapter ist für kleine Flaschenöffnungen geeignet.

Der Standardadapter ist für die meisten Wasserflaschen auf dem Markt geeignet.

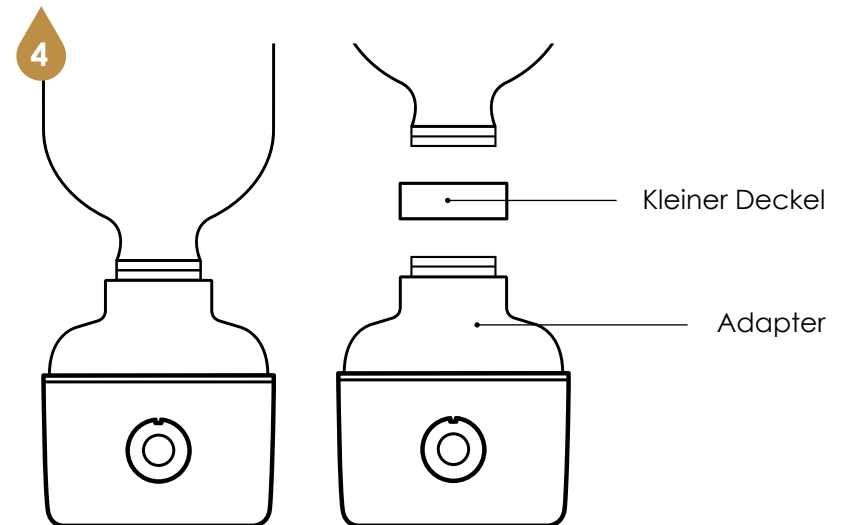


AUFBAU MIT DER WASSERSTOFFPUMPE

1. Nehmen Sie die Produktionseinheit, die Flasche und den Deckel aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie die schwarze Gummiverbindung der Wasserstoffpumpe mit dem Adapter und stellen Sie sicher, dass diese fest miteinander verbunden sind.

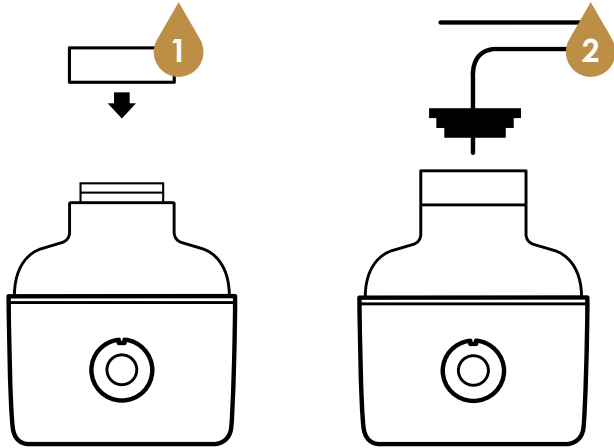

ERZEUGUNG VON WASSERSTOFFWASSER


1. **EINSCHALTEN.** Drücken Sie die Starttaste zweimal und der Generator führt eine 5-minütige Elektrolyse durch. Drücken Sie die Starttaste dreimal und die Elektrolyse wird 10 Minuten andauern.
1. **AUSSCHALTEN.** Der Generator schaltet sich nach 5 bzw. 10 Minuten automatisch aus. Wenn Sie den Vorgang manuell stoppen müssen, so drücken Sie während der Elektrolyse einmal die Starttaste.

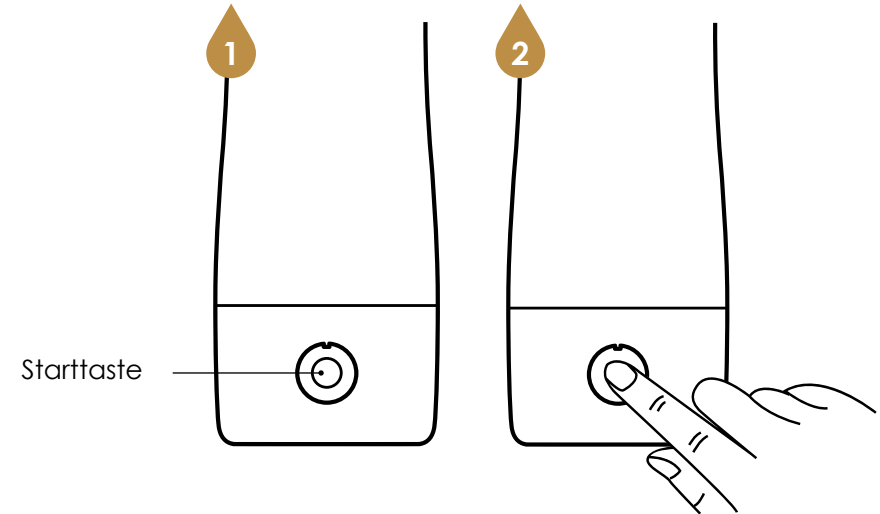

3. **BETRIEB.** Die LED-Anzeige leuchtet während des Betriebs blau und während des Ladevorgangs rot. Wenn die LED-Anzeige grün leuchtet, ist die Batterie vollgeladen.

Wenn die LED-Anzeige während der Elektrolyse rot blinkt, bedeutet es, dass die Batterie im Generator leer ist und aufgeladen werden muss.

Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und grün, wenn die Batterie vollgeladen ist.

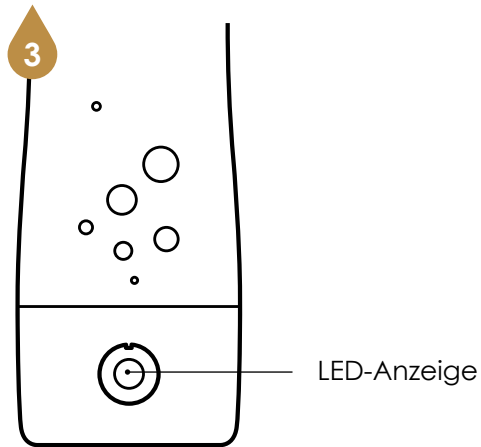


ERZEUGUNG VON OZONWASSER (NICHT TRINKBAR)

1. **EINSCHALTEN.** Drücken Sie die Starttaste so lange, bis der Generator einen Signalton erzeugt.


2. **AUSSCHALTEN.** Nach 5 Minuten hört der Signalton auf und der Generator stoppt gleichzeitig die Elektrolyse.

3. **BETRIEB.** Der Generator erzeugt während des gesamten Vorgangs einen Signalton und leuchtet rot sowie blau.

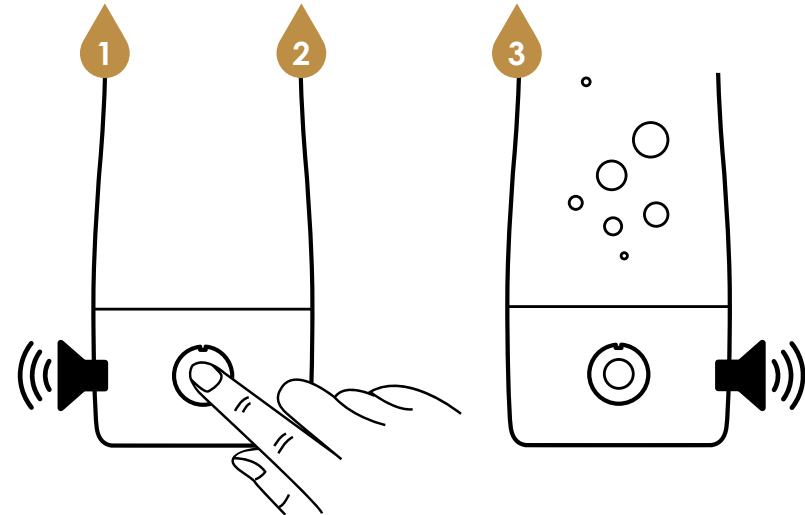

AUFBAU MIT DEM MOLEKULAREN WASSERSTOFF-INHALATOR


1. **EINSCHALTEN.** Bauen Sie die schwarze Gummiverbindung mit dem Adapter der Wasserstoffpumpe zusammen. Setzen Sie sie auf den Generator und stellen Sie sicher, dass diese fest miteinander verbunden sind. Füllen Sie den Generator mit etwas Wasser auf, sodass sich der Adapter der Wasserstoffpumpe über dem Wasser befindet. Verbinden Sie es mit der Wasserstoff-Pumpe.

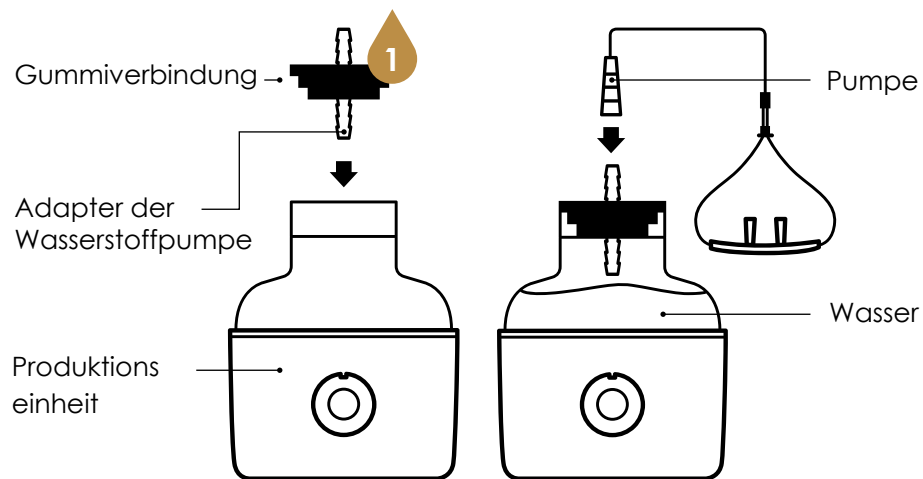

INHALATION

2. **AUSCHALTEN.** Nach 10 Minuten schaltet sich der Generator automatisch aus. Wenn Sie den Vorgang manuell stoppen müssen, so drücken Sie während der Inhalation einmal die Starttaste.

3. **BETRIEB.** Führen Sie die Nasenbrille in Ihre Nase ein. Drücken Sie dreimal die Starttaste, um den Inhalationsvorgang zu starten. Der Vorgang dauert 10 Minuten, was einer vollständigen Sitzung entspricht.

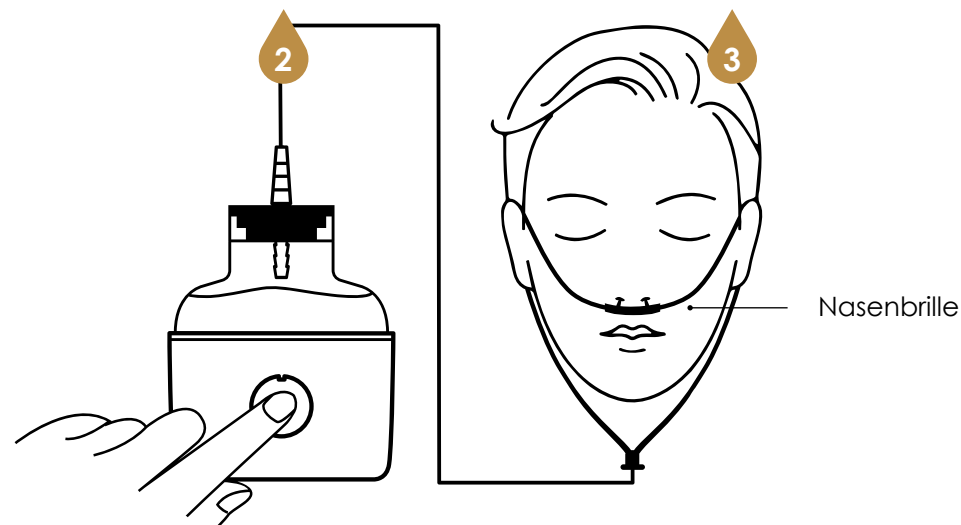


WASSERSTOFFWASSER-GENERATOR

AUFLADUNG

Wenn die LED-Leuchte an der Produktionseinheit rot blinkt, laden Sie den Generator auf.

Schließen Sie den Stecker an eine Stromquelle an.

Die LED-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn die LED-Leuchte grün leuchtet, so ist der Akku vollgeladen. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.

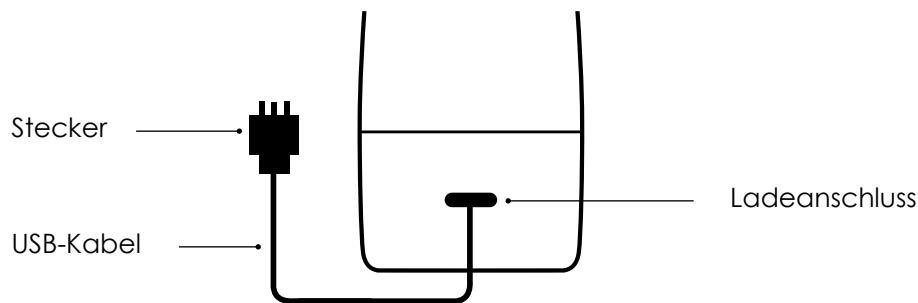

INSTANDHALTUNG

1. Wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass sich am Flaschenkörper und am Boden weiße Plättchen befinden, füllen Sie die Flasche mit warmem Wasser, sodass alle weißen Plättchen bedeckt sind und geben Sie dann etwas Essig oder Zitronensäure hinzu. Warten Sie eine Weile und waschen Sie die Flasche dann mit sauberem Wasser. Dadurch werden die weißen Ablagerungen effektiv reduziert und die Lebensdauer des Generators verlängert.

2. Die Temperatur des Wassers, das für den Generator oder für die Reinigung der Flasche benutzt wird, sollte unter 95 °C liegen. Sonst kann heißes Wasser Komponenten des Generators schädigen.

3. Wenn der Wasserstoffgenerator längere Zeit nicht benutzt wird, geben Sie bitte etwas gereinigtes Wasser in den Generator und legen Sie den Deckel auf die Elektrolyseplatte, sodass sie feucht bleibt. Sonst wird die Ionenmembran aufgrund einer langzeitigen Trocknung ihre Funktion verlieren.

WARNUNG!



Verfügbare Wasserquellen: Die Wasserquelle sollte den Standards für die Trinkwasserqualität entsprechen. Wir empfehlen Ihnen, Flaschenwasser, destilliertes oder gereinigtes Wasser zu verwenden. Geben Sie keinen Saft, Tee oder Milch in die Flasche, da sonst die Elektrolyseplatte beschädigt werden kann.



Geben Sie keine leitfähigen Metalle oder Flüssigkeiten in die Flasche.



Spülen Sie vor der Anwendung den Generator ein bis zweimal mit warmem Wasser (≤ 95 °C). Geben Sie dann warmes Wasser (≤ 95 °C) hinein und lassen Sie den Generator 2-3-mal durchlaufen. Gießen Sie dieses Wasser ab und benutzen Sie den Generator anschließend nach Bedarf. Bitte halten Sie die Elektrolyseplatte während des täglichen Gebrauchs feucht, um Probleme mit einer trockenen Ionenmembran zu vermeiden.



Laden Sie den Generator vor der ersten Anwendung mit einer geeigneten Spannung auf, bis die LED-Leuchte grün leuchtet.



Wenn Sie dieses Produkt verwenden, legen Sie es bitte auf eine flache und stabile Oberfläche.



Bitte halten Sie den Wasserstoffwasser-Generator von offenem Feuer fern.



Wenn Sie etwas Wasser in den Generator geben, lassen Sie ihn nicht mehr als dreimal mit demselben Wasser arbeiten. Sonst tritt aufgrund des hohen Luftdrucks im Flascheninneren das Wasser aus der Öffnung für den Gasauslass aus.

WASSERSTOFFWASSER-GENERATOR

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	LÖSUNG
Wenn der Nutzer den Deckel der Elektrolyseplatte zum ersten Mal bei der ersten Anwendung des Generators öffnet, so wird er etwas Wasser auf der Elektrolyseplatte finden.	Dies ist beabsichtigt. Wir geben etwas reines Wasser hinein, um die Elektrolyseplatte zu befeuchten, damit die Ionenmembran nicht austrocknet und der Generator nicht nutzlos wird.
Wenn Wasser ausläuft/	Stellen Sie sicher, dass der Flaschenkörper und die Produktionseinheit fest miteinander verbunden sind. Sie können den Flaschenkörper abnehmen und dann wieder festziehen. Wenn weiterhin Wasser ausläuft, überprüfen Sie bitte, ob sich im Boden und im Deckel Gummidichtungen befinden. Wenn keine Dichtungen vorhanden sind oder eine Dichtung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um welche zu kaufen.
Wenn während der Elektrolyse Wasserstoffblasen entstehen, aber die LED-Leuchte nicht funktioniert.	Die LED-Leuchte funktioniert nicht. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

PROBLEM	LÖSUNG
Wenn es während der Elektrolyse zu einer schwachen Blasenbildung kommt.	Wenn der Wasserstoffwasser-Generator zum ersten Mal verwendet wird, ist die Ionenmembran trocken und die Permeabilität möglicherweise nicht perfekt, sodass es zu einer schwachen Blasenbildung und einer niedrigen Wasserstoffkonzentration kommt. Nach dem ersten oder zweiten Elektrolysevorgang, sollte dies besser werden. Wenn es nach mehreren Elektrolysevorgängen nach wie vor zu einer schwachen Blasenbildung kommt, so verwenden Sie bitte Wasser mit einer Temperatur von etwa 50 °C für diesen Vorgang, da warmes Wasser die Permeabilität der Ionenmembran beschleunigt. Wenn es nicht besser wird, geben Sie bitte eine halbe Flasche Wasser hinein und lassen Sie es für 8 bis 24 Stunden stehen, damit es die Ionenmembran vollständig durchdringen kann. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Wenn das LED-Licht erlischt, nachdem Sie die Schalttaste gedrückt haben.	Bitte überprüfen Sie, ob der Generator aufgeladen ist. Falls dies nicht der Fall ist, laden Sie ihn auf. Wenn Sie die Schalttaste drücken, während der Generator vollgeladen ist, er aber nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler.

COUPON No.1 for warranty Repair of the DeAqua Device

Collected « ____ » ____ 20 ____ Repair completed by ____
 (Last name, signature)

Distributed by Deta Elis Cyprus LTD Office - 179 Agias
 Fylaxeos str. 3083, Limassol, Cyprus

COUPON No. 1

For warranty Repair of the DeAqua Device

Sold by the store _____

 (name of trading organization)

Store's stamp _____ Signature _____

The owner and his/her organization _____

 Signature _____

The repairs to fix the malfunctions have been completed:

Date _____ Repair completed by _____

Owner _____ Signature _____

Repair facility _____

Company's stamp « ____ » ____ 20 ____ r.

Responsible person _____ Signature _____

COUPON No.2 for warranty Repair of the DeAqua Device

Collected « ____ » ____ 20 ____ Repair completed by ____
 (Last name, signature)

Distributed by Deta Elis Cyprus LTD Office - 179 Agias
 Fylaxeos str. 3083, Limassol, Cyprus

COUPON No. 2

For warranty Repair of the DeAqua Device

Sold by the store _____

 (name of trading organization)

Store's stamp _____ Signature _____

The owner and his/her organization _____

 Signature _____

The repairs to fix the malfunctions have been completed:

Date _____ Repair completed by _____

Owner _____ Signature _____

Repair facility _____

Company's stamp « ____ » ____ 20 ____ r.

Responsible person _____ Signature _____

**HYDROGEN & ANTISEPTIC
NANO-WATER**



Distributed by Deta Elis Cyprus LTD
179 Agias Fylaxeos str. 3083 Limassol
Tel. +357 25222910

www.deholding.info